

カテーテル、スタートアップキット仕様

より速く、より正確に患者体温を調節するために開発された、血管内体温調節用カテーテルです。


個々の患者の体格や使用目的に合わせ、異なった長さ・挿入部位・熱交換パワーを備えた3種類のIVTMカテーテルを取り揃えています。

中心静脈カテーテルに体温管理機能を付加

救命救急領域において一般的に使用されるトリプルルーメンの中心静脈カテーテルに、体温管理機能が兼ね備えられています。そのため、一つのカテーテルで治療が可能です。

体内からの冷却および加温

正確で高速な温度管理を実現するため、温度制御された生理食塩水はカテーテル内に循環し、静脈血と熱交換を行います。

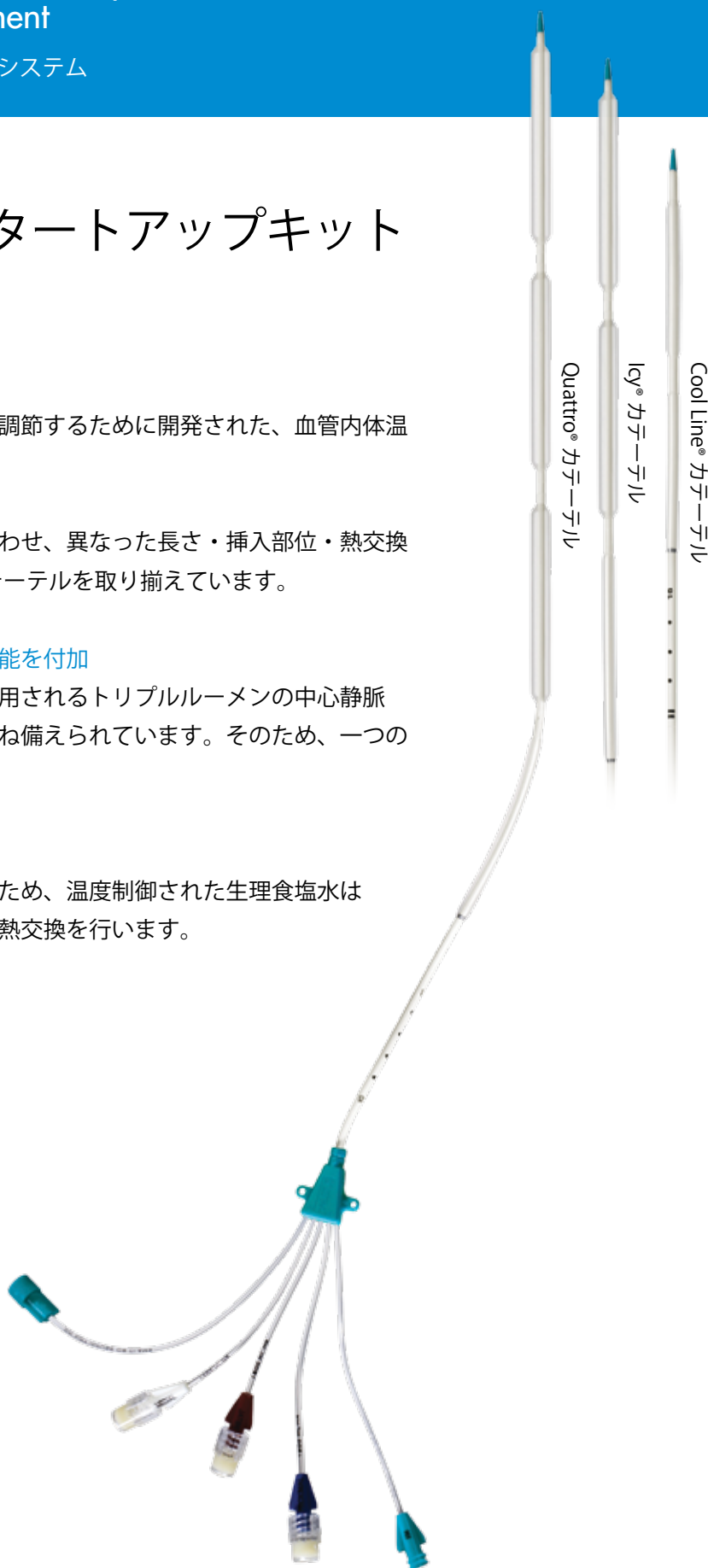



サーモガードシステム

カテーテル仕様【生物由来製品】

*キットの構成品には、セルジンガー法を用いてカテーテル挿入を行う際に必要な、ガイドワイヤ、ダイレクタなどを含みます

製品名	COOLINE カテーテルキット	ICY カテーテルキット	Quattro カテーテルキット
カタログ番号	8700-0654-03	8700-0657-03	8700-0660-03
医療機器製造販売承認番号	22400BZI00010000	22800BZI00008000	22800BZI00008000
JAN コード	00849111050074	00849111050043	00849111050050
長さ	22cm	38cm	45cm
患者の身長	≥100cm	≥135cm	≥150cm
直径	3.10mm (9.3Fr)	3.10mm (9.3Fr)	3.10mm (9.3Fr)
バルーン個数	2 個	3 個	4 個
バルーン拡張時直径	遠位バルーン 5.0 mm 近位バルーン 4.0 mm	遠位バルーン 8.0 mm 中間バルーン 8.0 mm 近位バルーン 5.0 mm	遠位バルーン 8.0 mm 中間バルーン 8.0 mm 中間バルーン 8.0 mm 近位バルーン 5.0 mm
注入ルーメン数	3	3	3
挿入部位	内頸静脈 鎖骨下静脈 大腿静脈	大腿静脈	大腿静脈
滅菌	EO	EO	EO
コーティング	ブタ腸粘膜由来 ヘパリンナトリウム	ブタ腸粘膜由来 ヘパリンナトリウム	ブタ腸粘膜由来 ヘパリンナトリウム
使用期間	7 日間	4 日間	4 日間
使用目的	集中治療室などにおいて、中心静脈カテーテルを必要とする急性重症脳障害を伴う発熱患者に対し、発熱負荷を軽減するための解熱剤、冷却用ブランケット等の補助として、専用の中心静脈留置型熱交換用環流式バルーン付カテーテルを介し、血管内で血液との熱交換を行う（ただし、低体温療法を除く）	心停止・心拍再開後の患者に対して、体温管理（体温管理療法）に用いる。 中心静脈カテーテルを必要とする患者に対して、正常体温維持に用いる。（ただし、正常体温維持が必要な患者に限る）	

すべての IVTM カテーテル：

- 親水性ヘパリンコーティング
- 薬剤注入、採血および中心静脈圧モニタリングが可能な、トリプルルーメン中心静脈カテーテル
- 血管内での適切な留置位置を視覚的に確認するため、カテーテルシャフト、先端部、マーカーバンドはX線不透過
- カテーテルキットは、カテーテル挿入に必要な付属品が含まれています。
- MRI対応
- ラテックスフリー
- カテーテルをサーモガード本体に接続するためのスタートアップキットが必要となります。



スタートアップキット

添付文書およびカテーテルの使用説明書を参照してください。

<選任製造販売業者>

旭化成ゾールメディカル株式会社
〒105-0003
東京都港区西新橋 2-1-1 興和西新橋ビル
TEL：03-6205-4921 (IVTM 事業本部)
FAX：03-6205-4923

<外国特例承認取得者>

ゾール サーキュレーション
ZOLL Circulation, Inc. (米国)

スタートアップキット仕様

製品名	スタートアップキット (標準)	スタートアップキットEX (ロング)
カタログ番号	8700-0666-03	8700-0667-03
医療機器製造販売承認番号	22400BZI00010000	22400BZI00010000
JAN コード	00849111050029	00849111050081
プライミング量	200ml	214ml
プライミング源	滅菌生理食塩水	滅菌生理食塩水
熱交換器	ディスポーザブル ステンレススチール製コイル	ディスポーザブル ステンレススチール製コイル
滅菌	ガンマ線	ガンマ線
長さ	183cm	274cm

© 2016 ZOLL Medical Corporation. Thermogard XP, Cool Line, Icy, Quattro, Solex, および IVTM は、ZOLL Medical Corporation と ZOLL Circulation, Inc. の商標です。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

MCN IP 1601 0088-36
104299-001 Rev 1

ZOLL®