

進化した「胸骨圧迫ヘルプ機能」を搭載
迅速な未就学児対応を実現したフル・レスキューAED

ZOLL AED 3®

強く・速く・絶え間なくをサポート
進化した「胸骨圧迫ヘルプ機能」

ボタンひとつでモード切替
迅速な未就学児対応を実現

5年間消耗品交換不要*で
トータルコスト削減

* 除細動パッド未使用の場合



ガイドライン
2020対応

 AED3は耳が不自由な方
にもご使用いただけます

一般的名称：非医療従事者向け自動除細動器
販売名：ZOLL AED 3 自動体外式除細動器
医療機器承認番号：30100BZ100003000
クラス分類：高度管理医療機器(クラスⅢ) / 特定保守管理医療機器

電気ショックまでの時間と生存退院率

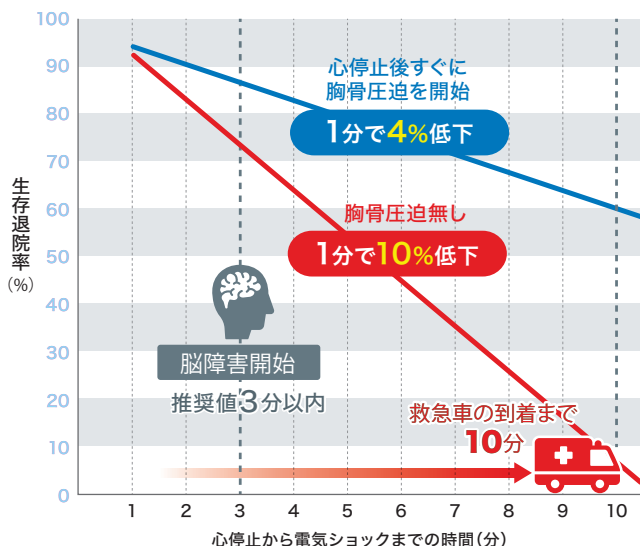


図) AHAガイドライン2005、総務省消防庁「令和6年版 救急救助の現況」の情報をもとに作図

適切な胸骨圧迫により、
生存率が2倍以上に向上

AEDによる電気ショックのみ実施の場合に比べ、AEDと適切な胸骨圧迫の実施では生存率の低下を4%/分に抑制、生存率を2倍以上向上させ、10分後でも約60%の生存率を保つことができます。

「JRC蘇生ガイドライン2020」では、迅速で絶え間ない胸骨圧迫の実施が推奨されています。




除細動器のグローバル・リーダー

ZOLL独自の技術と機能で適切な救命処置をサポートします。

1 強く・速く・絶え間なくをサポート 進化した「胸骨圧迫ヘルプ機能」

適切な救命処置に欠かせない良質な胸骨圧迫。ZOLLが世界で初めて開発した「胸骨圧迫ヘルプ機能」は、胸骨圧迫の深さを除細動パッドの「加速度センサー」で計測し、リアルタイムに救助者へフィードバック。ガイドライン推奨の約5cmの深さ、100～120回/分の速さの質の高い胸骨圧迫へガイドします。

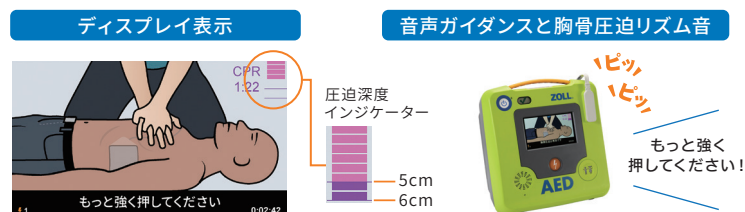

2 胸骨圧迫中断時間を大幅に短縮 RapidShock®テクノロジー


心電図解析時間が、当社従来解析の最短6秒から最短3秒へ大幅短縮を実現。胸骨圧迫の中断時間を最小限にし、絶え間ない胸骨圧迫をサポート。傷病者の転帰向上に貢献します。



*小学生～大人用モードのみ適用、初回心電図解析を除く

3 ボタンひとつでモード切替 迅速な未就学児対応を実現

傷病者が未就学児の場合でも未就学児専用パッドへの付け替え・使用する必要がなく、迅速な救命処置が行えます。

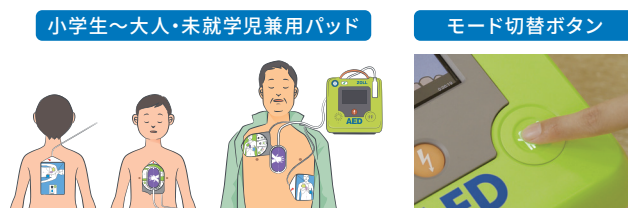

4 使いやすさを追求 初めてでも迷わない高い操作性



- 大きなフルカラー高解像度液晶ディスプレイ
- 耳の不自由な方が使用できるよう配慮した製品設計で耳マークを取得。工場などの騒音レベルが高い場所でもお使いいただけます。
- 縦置き/ 水平置き の2WAYデザインと、角度を問わず見やすい双方向ディスプレイ

5 メンテナンスの手間とコストを削減 5年間消耗品買い替え不要

お忙しい設置管理者様にとって悩みの種である消耗品も、交換の手間と費用が要らずトータルコスト削減に貢献します。



5年間交換不要の
バッテリーと除細動パッド*

*未使用の場合

掲載内容は、2025年3月現在のものです。設計・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合があります。

■ 使用上の注意

■ AEDは救命処置のための医療機器です。■ AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時、廃棄時、設置場所が変更となった時には製造販売業者または販売業者まで速やかにご連絡ください。■ AED設置者及び管理者は品質保証及び安全管理のため、以下の内容の確認をお願いいたします。

● ご使用の前に取扱説明書及び注意書きをよくお読みの上、正しくお使いください。● 添付文書は必ずお読みください。● 製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。● AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検してください。● 除細動パッド、バッテリーには交換期限があるため、「AED消耗品情報」タグを本体またはソフトケース等のわかりやすい位置に貼り、交換期限の確認及び、期限内の交換は確実に実施してください。● 除細動パッドは再使用禁止であり、使い捨てです。

【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル
tel.03-6205-4544 fax.03-6205-4923

www.ak-zoll.com

旭化成AEDコールセンター(24時間受付)

0800-222-0889

【外国特例承認取得者】
ZOLL Medical Corporation (米国)



【ご用命は】